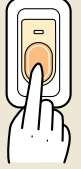
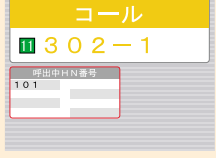
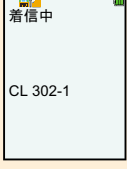


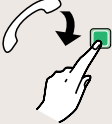
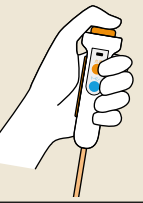
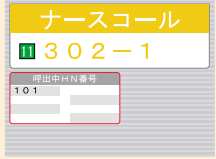



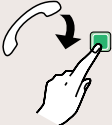
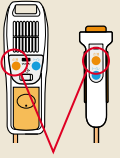
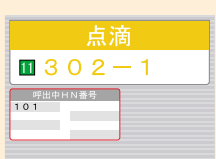


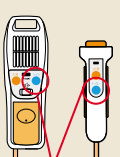
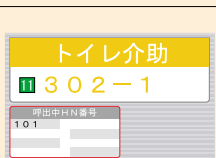




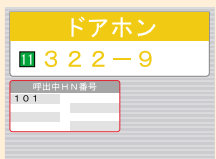



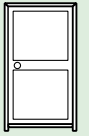





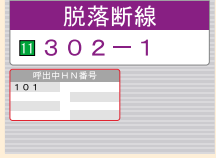





呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける		対応	復旧	
		親機	ハンディナース (IOS-301JR)			廊下表示 集合廊下灯 アダプター方式
一般呼出	コール 		 着信中 CL 302-1	 早い橙色点滅 点灯 早い 橙色点滅		 通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
		♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)			
	ナースコール 		 着信中 NC 302-1	 早い橙色点滅 点灯 早い 橙色点滅		 通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
		♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)			
	点滴呼出 	点滴ボタン を押す		 着信中 TN 302-1	 早い橙色点滅 点灯 早い 橙色点滅	呼出元を 確認し、 対応 します
♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ		♪ピー… (着信ランプ:黄色)				
トイレ介助呼出 	トイレ介助 ボタンを押す		 着信中 TK 302-1	 早い橙色点滅 点灯 早い 橙色点滅	呼出元を 確認し、 対応 します	 通話終了もしくは 復旧ボタンを 押す
	♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)				
ドアホン呼出 	玄関子機の 呼出ボタン		 着信中 DC 322-9	—		 通話終了
	♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)				
解錠呼出 	電気錠の 解錠		 着信中 KC 323-9	—		 通話終了
	♪ピンポン(チャイム)/各種メロディ	♪ピー… (着信ランプ:黄色)				
脱落断線 約20秒後 (低) 呼出優先度	脱落断線 警報 		 着信中 DD 302-1	 遅い橙色点滅 点灯 遅い 橙色点滅	呼出元を 確認し、 対応 します	 脱落・断線 を直します
		♪プープー	♪ピーピー… (着信ランプ:紫色)			