

- 1 ナースコールシステム
- 2 Vi-nurse
- 3 NFXシステム
- 4 ハンディナースシステム

介助のタイミングをナースコールへお知らせ。 患者(入所者)さんのトイレ内転倒事故を防止。

- 5 センサー・マグネットマーク
- 6 ハンディナースシステム
- 7 接続システム

アームレストがセットされると、設定された時間の振動が続いたり動きがない場合にセンサーが感知し、ナースコールを呼出。



アームレストの裏側にセンサー

- トイレでの排泄を助け、不意の立ち上がりによる転倒を予防します。
- トイレ内に設置されている手すりに取り付けます。(条件によっては設置できない場合があります。現場調査、設置条件打合せが必要です。)



ころばんぞう
KMKZ470(市販品)
※トーヨーベンディング(株)製
お問い合わせ先(052)569-5551



〈ナースコール運動あり〉
受信ユニット
RXF-740A(市販品)
※竹中エンジニアリング(株)製

※ナースコールシステムVi-nurseに対応。ナースコールシステムと連動する場合は、別途接続工事と打合せが必要です。

ころばんぞう送信機
2018年8月発売


または
〈ナースコール運動なし〉
受信機
HC-350(市販品)
※竹中エンジニアリング(株)製

見守りセットした患者(入所者)さんが便座から立ち上がり離れようとする時センサーが感知し、ナースコールを呼出。



便座の裏側にセンサー

- 便座の裏側にセンサーを取り付け、体重がかからなくなるとアラームやあらかじめ録音した音声でお知らせします。

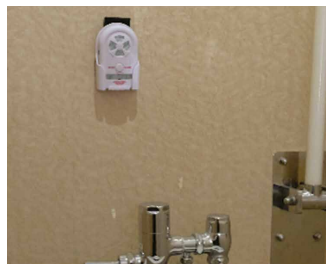

コントロール装置




トイレセンサー

トイレセンサー
M8350TN(市販品)
※(株)メディカルプロジェクト製

※ナースコールシステムVi-nurseに対応。ナースコールシステムと連動する場合は、別途接続工事と打合せが必要です。

併用をおすすめします

ころばんぞうとトイレセンサーの併用により、アームレストの横方向へのすり抜け時もセンサーが感知し、ナースコールを呼出。

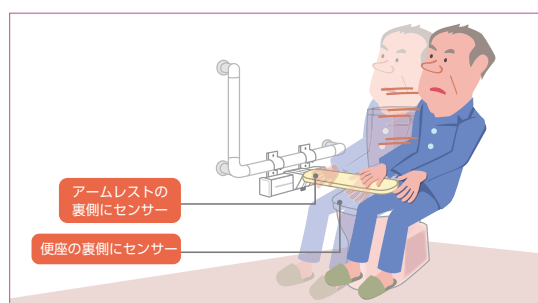

アームレストの裏側にセンサー

便座の裏側にセンサー

- 8 ナースコール
- 9 FAGUS
- 10 緊急通報装置
- 11 Non-nurseシステム
- 12 保命システム